

# カラム取扱説明書

## Shodex IC YK-421

(カラム性能を十分に発揮させ、安定して長期間ご利用いただくために、取扱説明書をよく読んでからお使いください。)

### 取り扱い上の注意 <重要>

#### 警告

※分析に使用する溶媒や試薬を取り扱う際は、製造元が発行する安全データシート(SDS)を確認し、使用上の注意事項を順守してください。死亡または重傷を負う可能性があります。

※有機溶媒や酸、アルカリなどの試薬を取り扱う際は、直接人体に触れないよう保護メガネや手袋などの保護具を着用してください。薬傷のおそれがあります。

### ご使用前に

- 梱包状態、カラムの外観に異常がないか確認してください。
- カラム外箱とカラム本体に貼られているラベルシールに製品名、シリアルナンバー(Serial no.またはS/N)が記載されていますので確認してください。
- 検査成績書(CERTIFICATE OF ANALYSIS)は、Shodex WEBサイトの検査成績書ダウンロードページにアクセスし、ダウンロードしてください。ダウンロードにはシリアルナンバーの入力が必要です。  
検査成績書ダウンロードURL <https://www.shodex.com/download/>

### 1. はじめに

このたびは、Shodex製品をご購入いただき、ありがとうございます。

Shodex IC YK-421は、1価、2価陽イオン同時分析に適したノンサプレッサー方式のイオンクロマトグラフィー用カラムです。無機陽イオンの他、アルキルアミンの分析にも好適です。

### 2. カラム各部の名称

Shodex WEBサイトを参照ください。

参照URL <https://www.shodex.com/ja/da/07.html>

### 3. カラムの仕様

製品コード	製品名	サイズ (mm)		粒径 (μm)	理論段数 (カラム1本当たり)
		内径	長さ		
F7120012	IC YK-421	4.6	125	5	2,800 以上
F6709608	IC YK-G	4.6	10	5	(ガードカラム)

充てん剤 : カルボキシル基を結合したシリカ系多孔質粒子

カラム材質 : SUS-316

カラム末端接続ネジ : オンネジ型 No. 10-32 UNF

出荷時封入液 : 5 mM 酒石酸 + 1 mM ジピコリン酸 + 24 mM ホウ酸水溶液

### 4. 使用可能条件

製品名	流量 (mL/min)		最大圧力 (MPa/カラム)	pH 範囲	温度 (°C)	
	常用	最大			推奨	範囲
IC YK-421	1.0	1.5	15	2 ~ 7	40	室温 ~ 60
IC YK-G	—	—	—			

使用可能な溶媒は、以下の通りです。

- (1) 基本の溶離液は、5 mM 酒石酸 + 1 mM ジピコリン酸 + 24 mM ホウ酸水溶液です。ジピコリン酸は、2 価の陽イオンと錯イオンを形成し、2 価の陽イオンの溶出を早める効果があります。特にカルシウムイオンをマグネシウムイオンよりも早く溶出させます。ホウ酸は、有機酸系溶離液の保存性向上のために添加します。濃度の目安は、24 mM (1.5 g/L)です。  
※ホウ酸の添加による分離への影響はありません。
- (2) 酒石酸の代わりにクエン酸などの有機酸や硝酸やリン酸のような無機酸も使用可能です。
- (3) 溶離液の濃度、pH、溶離液の種類などを変えることにより、試料の溶出時間や溶出順序を変えることが可能です。
- (4) ナトリウムイオンとカリウムイオンの分離改善には、18-クラウン-6-エーテルなどのクラウンエーテルの添加が有効です。濃度の目安は、2 mM 以下です。
- (5) アセトニトリルは、70 % (v/v)まで添加可能です。

### 注意

※使用条件を順守してください。使用可能範囲外での使用は、カラムを劣化させるおそれがあります。

※酸の水溶液とアセトニトリルの混合溶媒を使用する場合は、塩が析出しないことを確認してください。

※カラム圧力は、溶離液組成、流量、カラム温度によって変動します。溶離液の組成を変更する場合は、使用可能最大圧力を超えないように流量やカラム温度を調整してください。

※ステンレス鋼を腐食する塩酸は使用しないでください。

## 5. 溶離液の調製

- (1) 気泡の発生を防ぐため、溶離液は十分に脱気してください。
- (2) 微細なゴミや不溶物が混在すると、カラムの性能低下やクロマトグラムのノイズの原因となりますので、メンブレンフィルター(0.45 μm)で溶離液をろ過してください。

### 注意

※水は、超純水製造装置で用時調製した水や開封直後の HPLC グレードの蒸留水を使用してください。

有機溶媒は、HPLC で問題無く使用できる品質が保証された HPLC グレードの使用をお勧めします。異なるグレードの有機溶媒を用いる場合は、分析に適した品質であることを確認してから使用してください。なお、開封後、長時間経過したものは使用しないでください。変性や吸湿、汚染などが起きている可能性があります。

※長期間保存した溶離液は使用しないでください。組成の変化などにより、溶出挙動の変化やカラムの劣化につながるおそれがあります。

### 参考

※オンラインで脱気が可能なデガッサの使用をお勧めします。

## 6. 試料の調製

- (1) 粒子状物質(不溶性物質)の目詰まりによるカラムの劣化もしくは性能の低下を防ぐため、試料はあらかじめメンブレンフィルター(0.45 μm)などでろ過してください。
- (2) 試料注入量はカラム 1 本あたり 100 μL 以下が目安です。
- (3) 試料の pH は、2~8 に調整してください。pH が 2 より低い場合は、陰イオン交換樹脂などで処理し、pH が 8 より高い場合は、希硝酸を添加して pH を調整してください。

### 注意

※試料を溶離液と異なる溶媒で溶解させた場合、溶離液に不溶な成分が存在すると注入後に析出してカラムを詰まらせるおそれがあります。

※試料濃度が高すぎたり、試料注入量が多すぎるとカラム本来の性能が十分に発揮できず、ピーク形状の異常や分離不良、再現性の低下などにつながるおそれがあります。そのような場合は、試料溶液の希釈や注入量の減少を適宜行ってください。

### 参考

※分析カラム保護のため、ガードカラムの使用をお勧めします。

## 7. カラムの使用方法

### 7-1. 流路の溶媒置換

カラムを装置に接続する前に装置の流路を十分に洗浄し、使用する溶離液で完全に置換してください。また、インジェクター流路(サンプルループ)もバルブを切り替えて洗浄し、置換してください。混和性または溶解性が低い溶媒に置換する場合は、双方の溶媒と混和性または溶解性のある溶媒組成に置換してから使用する溶媒に置換してください。


#### 注意

※カラムに使用できない溶媒が流路に残っているとカラムを劣化させるおそれがあります。

※溶離液の組成が大きく変わると、ポンプや配管に吸着していた汚れが剥がれ、カラムを劣化させるおそれがあります。

### 7-2. カラムの接続

- (1) カラム本体に貼られているラベルシールを確認し、Flow 方向(→)へ溶離液が流れるようにカラムを装置に接続してください。ガードカラムを使用する場合は、ガードカラム、分析カラムの順に接続します。
- (2) 配管とカラムのエンドフィッティングの間に空隙ができないように、配管をエンドフィッティングの奥に押し当てながらオシネジで固定してください。空隙があると試料が拡散し、ピークの広がりの原因となります。

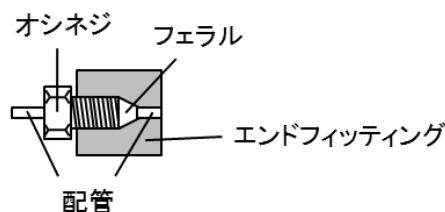

- (3) 流量を 0.3 mL/min 以下に設定し、通液を開始してください。カラムを加温して使用する場合は、設定温度になるまでは低流量のまま通液し、設定温度に達してから段階的に設定流量まで上げてください。

#### 警告

※溶媒の液漏れがないか確認してください。漏電や腐食、薬傷の原因となります。

#### 注意

※カラムを装置に接続する時は、カラム内に気泡が入らないようにしてください。カラムを劣化させるおそれがあります。

※ガードカラムを使用する時は、分析カラムを接続する前に溶離液を通液し、約 1 mL を廃棄してから分析カラムを接続してください。溶離液の通液直後、稀にカラム出口から黄色の溶離液が排出することがありますが、カラム異常によるものではありません。

※カラム接続時、または通液を停止している状態から通液を開始する時は、0.3 mL/min 以下の流量で通液してください。急激な圧力上昇はカラムを劣化させるおそれがあります。

※カラムを加温して使用した後は、流量を 0.3 mL/min 以下に下げ通液を続け、カラム温度を室温に戻してからポンプの通液を止めてください。カラム温度が高いまま通液を止めると溶離液の温度が下がる時に溶離液が収縮することでカラム内に空隙が発生し、カラムを劣化させるおそれがあります。

#### 参考

※使用可能最大圧力を超える使用を避けるため、ポンプのリミッタを設定することをお勧めします。

### 7-3. 溶離液の置換

溶離液を置換する時は、0.3 mL/min 以下の流量でカラム体積の 3～5 倍量を通液してください。

#### 注意

※溶離液組成の頻繁な変更はしないでください。カラムを劣化させるおそれがあります。

## 7-4. カラムの洗浄

流路系や試料中の不溶性物質または吸着性物質がカラム内に蓄積することで、溶出挙動や圧力の変化が生じることがあります。このような場合は、カラムを洗浄することで改善できる可能性があります。

ガードカラムを使用している場合は、最初にガードカラムを外して再測定してください。これで改善する場合は、ガードカラムに原因がある可能性が高いため、ガードカラムを洗浄してください。

ガードカラムを外しても改善が見られない場合は、ガードカラムと分析カラムの両方を洗浄してください。なお、ガードカラムと分析カラムは連結せずに個別に洗浄してください。また、分析カラムを複数本連結して使用している場合は、それぞれ 1 本ずつ個別に洗浄してください。カラム洗浄時は、検出器は接続せず、洗浄液はカラム出口から直接廃液容器で受け取るようにしてください。

カラムを洗浄しても改善しない場合は、新品カラムと交換してください。

### 【洗浄方法】

- (1) 不溶性物質がカラムの入口に目詰まりした場合は、カラムを逆向きにつなぎ替え、溶離液を常用流量の半分以下の流量で通液することにより取り除けることがあります。
- (2) 吸着性物質の具体的な洗浄方法は下記の例を参考にしてください。カラム洗浄時は、カラムを逆向きにつなぎ替えてください。

(洗浄例 1) 疎水性物質による汚染の場合

5 mM 酒石酸/アセトニトリル=50/50 を 0.3 mL/min の流量で 50 mL 通液します。

(洗浄例 2) 親水性物質による汚染の場合

50 mM 酒石酸水溶液を 0.3 mL/min の流量で 50 mL 通液します。

### 注意

※洗浄液のまま長時間封入するとカラムの劣化を早めるおそれがあります。カラム洗浄後は速やかに溶離液に置換してください。

## 8. カラムの保管

出荷時封入液に置換した後、装置から外して両端を付属の栓で密栓し、温度変化の少ないところ(冷暗所)で保存してください。溶離液の置換については、「7-3. 溶離液の置換」の項を参照してください。

### 注意

※カラム内は絶対に乾燥させないでください。カラムを劣化させるおそれがあります。

## 9. カラムの検定方法

検定条件は、本製品のCERTIFICATE OF ANALYSISに記載されていますので確認してください。Shodexでは、理論段数の算出は、「半値幅法」を採用しております。また、ピーク対称性の指標には、非対称係数(FAS)を採用しております。詳細につきましてはShodex WEBサイトを参照ください。

参照URL <https://www.shodex.com/ja/da/07.html>

### 注意

※理論段数や FAS は試料条件や分析条件が異なると値が大きく変わります。出荷時のカラム性能と比較する場合は、CERTIFICATE OF ANALYSIS に記載の試料条件および分析条件に揃えて測定してください。

## 10. その他の注意事項

- (1) カラムのエンドフィッティングは、絶対に外さないでください。
- (2) カラムには、叩く、落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
- (3) 各地方自治体が定める廃棄物の適正処理に従って廃棄処理を行ってください。

製品に関する情報や分析例は、Shodex WEB サイト(<https://www.shodex.com/>)を参照してください。その他、ご不明な点は、購入した販売店または Shodex WEB サイトからお問い合わせください。