




本号のカラム Shodex Asahipak GF-310HQ


本号のサンプル ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム ノニルフェニルポリオキシエチレン 陽イオン性界面活性剤

イオン性、非イオン性界面活性剤の分析には  
GF-310HQが適しています。


ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムと  
ノニルフェニルポリオキシエチレン

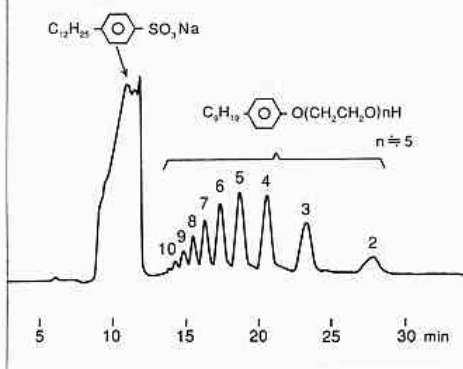

塩化ベンザルコニウムと  
ノニルフェニルポリオキシエチレン

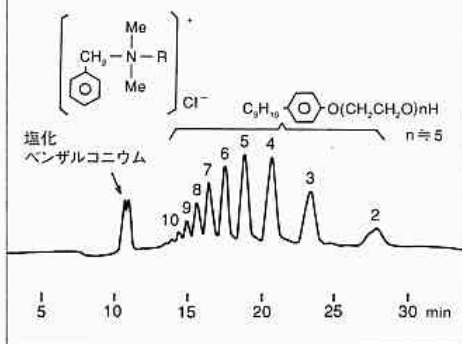

イオン性界面活性剤と非イオン性界面活性剤

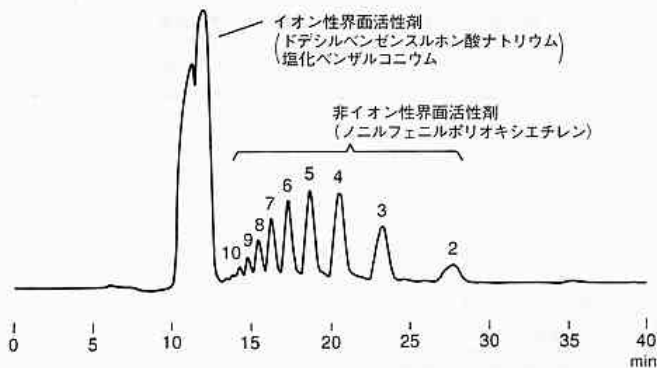

Column : Shodex Asahipak GF-310HQ  
Eluent : H<sub>2</sub>O/CH<sub>3</sub>CN = 50/50  
Flow rate : 0.6mL/min  
Detector : Shodex UV(220nm)  
Column temp. : 30°C  
Sample vol. : 20μL, 50ppm each

