



本号のカラム	Shodex GPC KF-400HQ シリーズ
本号のサンプル	ポリスチレン

## 高理論段数/省溶媒を追求した Shodex GPC KF-400HQ シリーズ

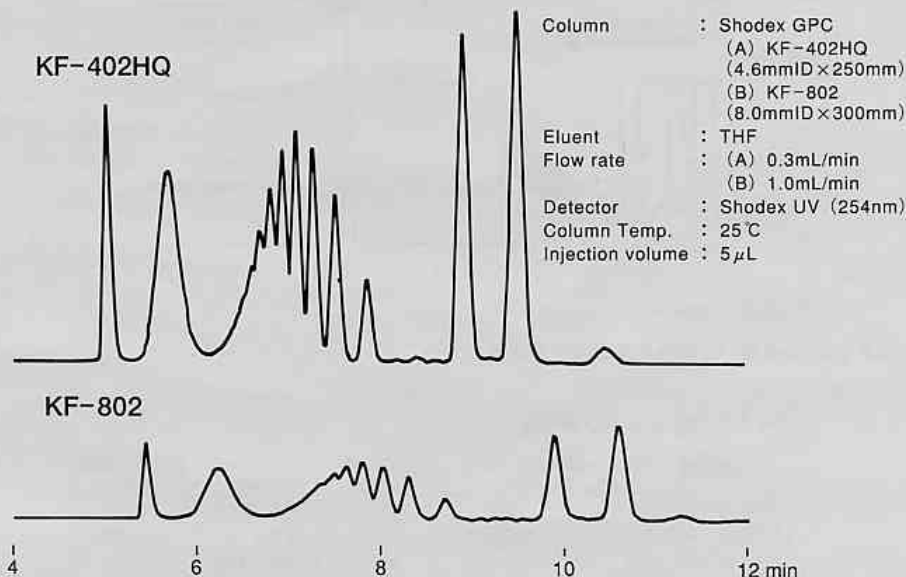


図1. KF-402HQ vs KF-802

### 高分解能セミマイクロGPCカラムKF-400HQシリーズの特長

●高理論段数 (N ≥ 25,000段/25cm)

低分子～高分子分析に適しています。

ダウンサイズ GPC専用装置Shodex GPC-104と併せてご使用頂くことで、従来に比べて高感度に分析できます。(図1、図2)。

LC/MS分析にも対応したカラムです。(図3)。

●省溶媒

KF-800シリーズの30%の溶媒使用量で分析できます。

