

# カラム取扱説明書

## Shodex GPC KF-400HQ シリーズ

(カラム性能を十分に発揮させ、安定して長期間ご利用いただくために、取扱説明書をよく読んでからお使いください。)

### 取り扱い上の注意 <重要>

#### 警告

※分析に使用する溶媒や試薬を取り扱う際は、製造元が発行する安全データシート(SDS)を確認し、使用上の注意事項を順守してください。死亡または重傷を負う可能性があります。

※有機溶媒や酸、アルカリなどの試薬を取り扱う際は、直接人体に触れないよう保護メガネや手袋などの保護具を着用してください。薬傷のおそれがあります。

### ご使用前に

- (1) 梱包状態、カラムの外観に異常がないか確認してください。
- (2) カラム外箱とカラム本体に貼られているラベルシールに製品名、シリアルナンバー(Serial no.またはS/N)が記載されていますので確認してください。
- (3) 検査成績書(CERTIFICATE OF ANALYSIS)は、Shodex WEBサイトの検査成績書ダウンロードページにアクセスし、ダウンロードしてください。ダウンロードにはシリアルナンバーの入力が必要です。  
検査成績書ダウンロードURL <https://www.shodex.com/download/>

### 1. はじめに

このたびは、Shodex製品をご購入いただき、ありがとうございます。

Shodex GPC KF-400HQシリーズは、有機溶媒系のサイズ排除クロマトグラフィー用セミマイクロカラムです。標準カラムよりも高感度、高分解能分析が可能で、有機物やオリゴマーの分離に適しています。排除限界分子量が異なる製品をラインアップしていますので、測定試料の分子量範囲に適したカラムを選択してください。

### 2. カラム各部の名称

Shodex WEBサイトを参照ください。

参照URL <https://www.shodex.com/ja/da/07.html>

### 3. カラムの仕様

製品コード	製品名	サイズ (mm)		粒径 ( $\mu\text{m}$ )	理論段数 (カラム1本当たり)	対象分子量範囲* (ポリスチレン換算)	排除限界分子量* (ポリスチレン換算)
		内径	長さ				
F6028111	GPC KF-401HQ	4.6	250	3	25,000 以上	100 ~ 700	1,500
F6028112	GPC KF-402HQ	4.6	250	3	25,000 以上	200 ~ 1,500	4,000
F6028114	GPC KF-402.5HQ	4.6	250	3	25,000 以上	300 ~ 10,000	20,000
F6028116	GPC KF-403HQ	4.6	250	3	25,000 以上	600 ~ 50,000	70,000
F6700300	GPC KF-G 4A	4.6	10	8	(ガードカラム)	—	—

\* 参考値としてご利用ください。

充てん剤 : スチレンジビニルベンゼン共重合体系多孔質粒子

カラム材質 : SUS-316

カラム末端接続ネジ : オンネジ型 No. 10-32 UNF

出荷時封入液 : テトラヒドロフラン(THF)

## 4. 使用可能条件

### 4-1. 基本条件

製品名	流量 (mL/min)		最大圧力 (MPa/カラム)	温度 (°C)	
	常用	最大		推奨	範囲
GPC KF-401HQ ~ KF-403HQ	0.3	0.5	7.0	25 ~ 40	20 ~ 60
GPC KF-G 4A	—	—	—		

### 4-2. 溶媒置換性

溶媒	製品名	
	KF-401HQ ~ KF-402.5HQ	KF-403HQ
クロロホルム	○	○
ベンゼン	○	○
トルエン	○	○
p-キシレン	○	○
o-ジクロロベンゼン(ODCB)	○	○
1,2,4-トリクロロベンゼン(TCB)	○	○
アセトン	○	○
メチルエーテルケトン	○	○
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)	○*	○*
N,N-ジメチルアセトアミド(DMAc)	○*	○*
N-メチルピロリドン(NMP)	○*	○*
ジメチルスルホキシド(DMSO)	△*	○*
ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP)	×	△*
ヘキサン	×	×
アセトニトリル	×	×
メタノール	×	×
水	×	×

○: 置換可能 △: 置換可能だが、若干性能が低下する場合あり \*: 40 °C以上で使用 ×: 置換不可

基本の溶離液は、テトラヒドロフラン(THF)です。可能な限り、安定剤(BHT)含有の THF を使用してください。

#### 警告

※THF は、空気中の酸素と反応すると徐々に過酸化物を生成します。過酸化物を濃縮すると爆発の危険性があります。分画した試料溶液を濃縮する場合は、特に注意が必要です。

#### 注意

※使用条件を順守してください。使用可能範囲外での使用は、カラムを劣化させるおそれがあります。

※BHT 不含の THF は、過酸化物が生成しやすく、ベースラインが安定しにくくなります。BHT 不含の THF を使用する場合は、開封直後のものを使用してください。

※BHT 含有の THF でも開封後、長時間経過したものは、過酸化物が生成している可能性が高いため、使用は避けてください。

※THF は吸湿性が高いため、使用中に大気中の水分を吸収しないように注意してください。

※カラム圧力は、溶離液組成、流量、カラム温度によって変動します。溶離液の組成を変更する場合は、使用可能最大圧力を超えないように流量やカラム温度を調整してください。

※高分子は、分子量が大きくなるほど分子鎖切断が起きやすくなります。分子鎖が切断されると真の分子量よりも小さい値を示したり、再現性が悪くなる場合があります。分子鎖切断が起きている可能性がある場合は、流量を下げた分析をお勧めします。

## 5. 溶離液の調製

- (1) 気泡の発生を防ぐため、溶離液は十分に脱気してください。
- (2) 微細なゴミや不溶物が混在すると、カラムの性能低下やクロマトグラムのノイズの原因となりますので、メンブランフィルター(0.45  $\mu\text{m}$ )で溶離液をろ過してください。

### 注意

※有機溶媒は、HPLC で問題無く使用できる品質が保証された HPLC グレードの使用をお勧めします。異なるグレードの有機溶媒を用いる場合は、分析に適した品質であることを確認してから使用してください。なお、開封後、長時間経過したものは使用しないでください。変性や吸湿、汚染などが起きている可能性があります。

※長期間保存した溶離液は、使用しないでください。組成の変化などにより、溶出挙動の変化やカラムの劣化につながるおそれがあります。

### 参考

※オンラインで脱気が可能なデガッサの使用をお勧めします。

## 6. 試料の調製

- (1) 試料の溶解および希釈には、できるだけ溶離液を用いてください。溶離液に溶解しにくい場合は、可能な限り溶離液組成に近づけるようにしてください。
- (2) 粒子状物質(不溶性物質)の目詰まりによるカラムの劣化もしくは性能の低下を防ぐため、試料はあらかじめメンブランフィルター(0.45  $\mu\text{m}$ )などでろ過してください。
- (3) 試料注入量は 5  $\mu\text{L}$  以下が目安です。
- (4) 高分子試料溶液の粘度は、高分子の分子量や濃度が大きく関係します。試料溶液の粘度が高いとピーク幅の広がりや溶出の遅れが生じ、分子量分布測定に影響を与えます。一般的に分子量が大きくなるほど粘度は高くなるため、試料濃度を下げてください。下記の表を目安に試料溶液を調製してください。

試料の分子量範囲	濃度 (w/v)
~ 5,000	1.0 % 以下
5,000 ~ 25,000	0.5 % 以下
25,000 ~ 200,000	0.25 % 以下

- (5) 試料に水、メタノール、ヘキサンなどが含まれる場合は、これらを取り除いてからカラムに注入してください。

### 注意

※試料を溶離液と異なる溶媒で溶解させた場合、溶離液に不溶な成分が存在すると注入後に析出してカラムを詰まらせるおそれがあります。

### 参考

※分析カラム保護のため、ガードカラムの使用をお勧めします。

## 7. カラムの使用法

GPC KF-400HQ シリーズは、セミマイクロカラムです。カラムの性能を十分に発揮するため、セミマイクロ仕様の装置を使用してください。

### 7-1. 流路の溶媒置換

カラムを装置に接続する前に装置の流路を十分に洗浄し、使用する溶離液で完全に置換してください。また、インジェクター流路(サンプルループ)もバルブを切り替えて洗浄し、置換してください。混和性または溶解性が低い溶媒に置換する場合は、双方の溶媒と混和性または溶解性のある溶媒組成に置換してから使用する溶媒に置換してください。


### 注意

※カラムに使用できない溶媒が流路に残っているとカラムを劣化させるおそれがあります。

※溶離液の組成が大きく変わると、ポンプや配管に吸着していた汚れが剥がれ、カラムを劣化させるおそれがあります。

## 7-2. カラムの接続

- (1) カラム本体に貼られているラベルシールを確認し、Flow 方向(→)へ溶離液が流れるようにカラムを装置に接続してください。ガードカラムを使用する場合は、ガードカラム、分析カラムの順に接続します。
- (2) 配管とカラムのエンドフィッティングの間に空隙ができないように、配管をエンドフィッティングの奥に押し当てながらオシネジで固定してください。空隙があると試料が拡散し、ピークの広がりの原因となります。

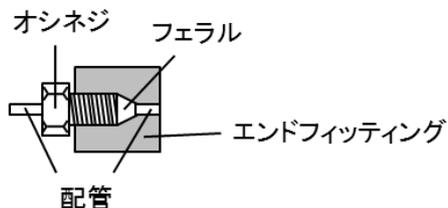

- (3) 流量を 0.1 mL/min 以下に設定し、通液を開始してください。カラムを加熱して使用する場合は、設定温度になるまでは低流量のまま通液し、設定温度に達してから段階的に設定流量まで上げてください。
- (4) カラムを複数本連結して使用することが可能です。排除限界分子量が異なるカラムを連結する場合は、上流側に排除限界分子量が大きいカラムを配置してください。

**警告** ※溶媒の液漏れがないか確認してください。漏電や腐食、薬傷の原因となります。

**注意** ※カラムを装置に接続する時は、カラム内に気泡が入らないようにしてください。カラムを劣化させるおそれがあります。

※カラム接続時、または通液を停止している状態から通液を開始する時は、0.1 mL/min 以下の流量で通液してください。急激な圧力上昇はカラムを劣化させるおそれがあります。

※カラムを加熱して使用した後は、流量を 0.1 mL/min 以下に下げ通液を続け、カラム温度を室温に戻してからポンプの通液を止めてください。カラム温度が高いまま通液を止めると溶離液の温度が下がる時に溶離液が収縮することでカラム内に空隙が発生し、カラムを劣化させるおそれがあります。

**参考** ※使用可能最大圧力を超える使用を避けるため、ポンプのリミッタを設定することをお勧めします。

## 7-3. 溶離液の置換

溶離液を置換する時は、カラムを 40 °C に加熱し、0.1 mL/min 以下の流量でカラム体積の 3 ~ 5 倍量を通液してください。

- (1) カラムに封入されている溶媒と置換する溶媒が混和するかどうかを確認してください。
- (2) カラムに封入されている溶媒と混和性のある溶媒で置換する場合は、カラムに封入されている溶媒と置換する溶媒の 1:1 の混合溶媒を通液してから、使用する溶媒に置換してください。
  - (例) THF から DMF に置換する時は、THF と DMF の 1:1 の混合溶媒を通液してから DMF に置換してください。
- (3) カラムに封入されている溶媒と混和性または溶解性が低い溶媒に置換する場合は、双方の溶媒と混和性または溶解性のある溶媒組成に置換してから、使用する溶媒に置換してください。
  - (例) THF から臭化リチウムを含む DMF に置換する時は、上記(2)の手順で DMF に置換してから臭化リチウムを含む DMF に置換してください。

**注意** ※溶離液組成の頻繁な変更はしないでください。カラムを劣化させるおそれがあります。

## 7-4. カラムの洗浄

流路系や試料中の不溶性物質または吸着性物質がカラム内に蓄積することで、溶出挙動や圧力の変化が生じることがあります。このような場合は、カラムを洗浄することで改善できる可能性があります。

ガードカラムを使用している場合は、最初にガードカラムを外して再測定してください。これで改善する場合は、ガードカラムに原因がある可能性が高いため、ガードカラムを洗浄してください。

ガードカラムを外しても改善が見られない場合は、ガードカラムと分析カラムの両方を洗浄してください。なお、ガードカラムと分析カラムは連結せずに個別に洗浄してください。また、分析カラムを複数本連結して使用している場合は、それぞれ 1 本ずつ洗浄してください。カラム洗浄時は、検出器は接続せず、洗浄液はカラム出口から直接廃液容器で受け取るようにしてください。

カラムを洗浄しても改善しない場合は、新品カラムと交換してください。

### 【洗浄方法】

不溶性物質がカラムの入口に目詰まりした場合は、カラムを逆向きにつなぎ替え、溶離液を常用流量の半分以下で通液することにより取り除けることがあります。

## 8. カラムの保管

使用した溶離液のまま、装置から外して両端を付属の栓で密栓し、温度変化の少ないところ(冷暗所)で保存してください。ただし、トリクロロベンゼンなどの融点が高く、保管時に固化する可能性が高い溶媒を使用した場合は、出荷時封入溶媒に置換してから保存してください。溶離液の置換については、「7-3. 溶離液の置換」の項を参照してください。

### 注意

※カラム内は絶対に乾燥させないでください。カラムを劣化させるおそれがあります。

## 9. カラムの検定方法

検定条件は、本製品のCERTIFICATE OF ANALYSISに記載されていますので確認してください。Shodexでは、理論段数の算出は、「半値幅法」を採用しております。また、ピーク対称性の指標には、非対称係数(FAS)を採用しております。詳細につきましてはShodex WEBサイトを参照ください。

参照URL <https://www.shodex.com/ja/da/07.html>

### 注意

※理論段数や FAS は試料条件や分析条件が異なると値が大きく変わります。出荷時のカラム性能と比較する場合は、CERTIFICATE OF ANALYSIS に記載の試料条件および分析条件に揃えて測定してください。

## 10. その他の注意事項

- (1) カラムのエンドフィッティングは、絶対に外さないでください。
- (2) カラムには、叩く、落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
- (3) 各地方自治体が定める廃棄物の適正処理に従って廃棄処理を行ってください。

製品に関する情報や分析例は、Shodex WEB サイト(<https://www.shodex.com/>)を参照してください。その他、ご不明な点は、購入した販売店または Shodex WEB サイトからお問い合わせください。