
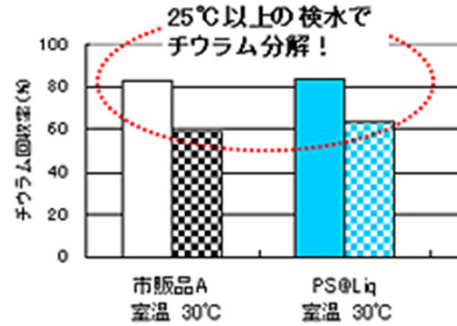


チウラム回収（低濃度）と水温の関係

1. チウラムの回収では、水温を25℃以下にする必要がある

■ プロトコル

水温の異なる超純水にチウラムを添加し、水温が回収率に与える影響を検証しました。

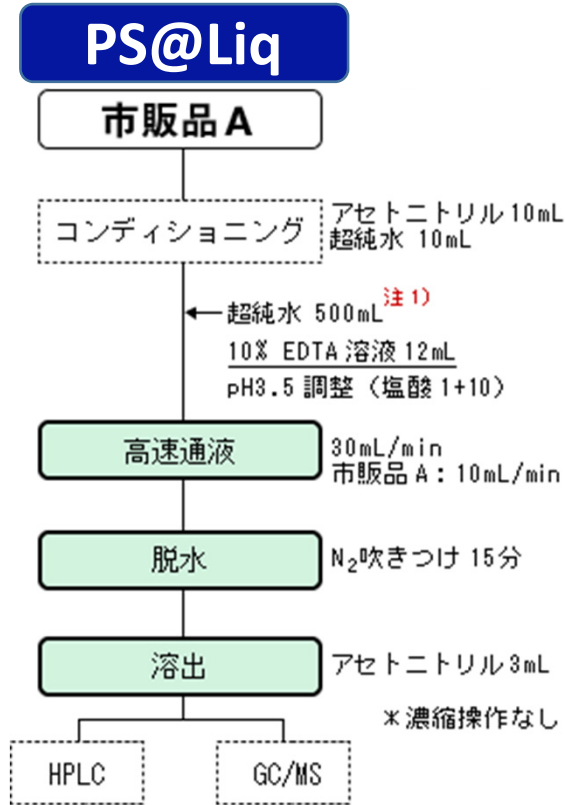

注1) 試料調製方法

超純水500 mLに下表の標準溶液を100 μL添加

農業成分名	標準液濃度	添加量	対基準値
チウラム	3μg/mL	0.3μg	1/10

■ 参考法令

S46 環境庁告示第59号 付表4及び付表5第2